



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KOWIN garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KOWIN**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KOWIN** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KOWIN y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.


SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669

service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTEL - WINCOPHONE



winco®

BALANZA

W7001 _____


MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA



www.winco.com.ar

ALIMENTACIÓN

Esta aplicación utiliza tres pilas "AAA", 1.5V. Cuando instale las nuevas pilas, asegúrese de colocarlas correctamente respetando la polaridad indicada. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas, ni diferentes tipos de pilas.

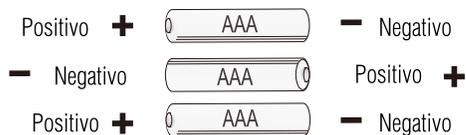

⚠ IMPORTANTE

Cuando use la balanza por primera vez o cuando mueva su ubicación. Se requiere un ajuste a cero. es decir, presione el centro de la escala para activar la potencia y espere hasta que la lectura vuelva a cero (0.0). Luego, ya puede ser utilizada normalmente. No se requieren más ajustes mientras la balanza permanezca en la ubicación original. Simplemente suba a la balanza para el pesaje posterior.

OPERACIÓN Y PESO

PASO 1 Coloque la balanza sobre una superficie firme y plana.

PASO 2 Si es la primera vez que utiliza la unidad o su posición ha sido cambiada, presione el centro de la misma para encender la balanza y aguarde a que en el visor se muestre "0.0". (ajuste a cero).

PASO 3 Suba a la plataforma de la balanza y permanezca quieto. Después de unos segundos, verá el peso parpadeando indicando la lectura de peso. Su peso se mostrará durante 10 segundos y la balanza se apagará automáticamente

Si desea volver a pesarse, baje de la balanza y vuelva a subir.



ESPECIFICACIONES

Unidad de medida: Kg.,
Peso mínimo: 5 Kg.
Escala: 0.1 Kg.
Visor LCD: 80 x 40 mm.

Alimentación: 3 pilas "AAA" x 1.5V.
Rango de peso: De 5 a 180 Kg.
Peso máximo: 180 Kg.
Indicador de batería baja y sobrepeso
Medidas: 302 x 302 x 24 mm.

ENCENDIDO

Con tecnología de paso, es decir pise sobre la balanza para obtener directamente su peso.

APAGADO

La unidad se apaga automáticamente luego de 10 segundos sin uso.

INDICACIÓN DE SOBRECARGA

Cuando el peso es superior a 180 Kg. En el visor se exhibirá "OL".



INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

Cuando en el visor se exhibe "LO", abra el compartimiento ubicado en la parte posterior y reemplace por una pila nueva.



SUGERENCIAS DE USO

No utilice la unidad sobre una alfombra o una superficie blanda.

Si la balanza no va a ser utilizada durante un período prolongado, retire las pilas.

Limpie la unidad con un paño suave y húmedo. No la exponga a goteos o salpicaduras. NO la sumerja en agua ni utilice limpiadores abrasivos.